




MỘT PHẦN TẤT YẾU CHO CUỘC SỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế massage không trọng lực
OR - 500

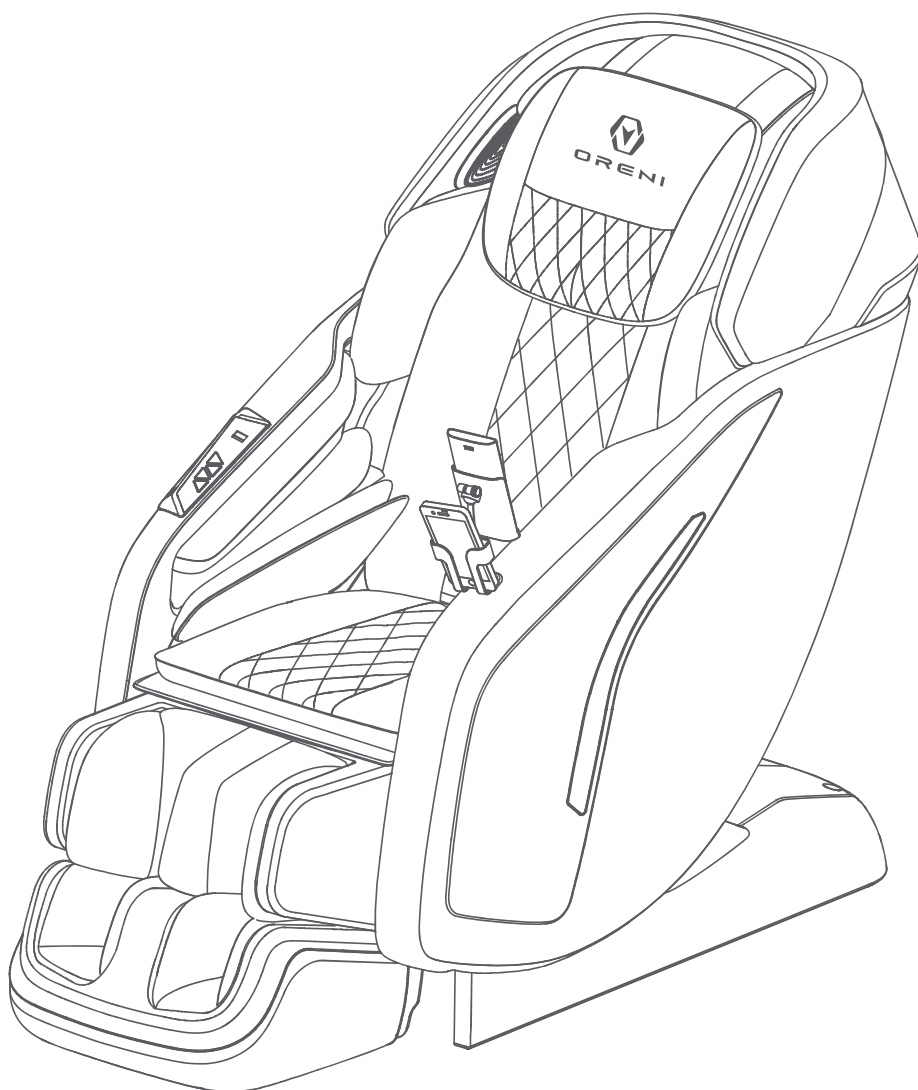

ORENI VIỆT NAM

Công ty chúng tôi sẽ có những cải tiến sản phẩm và sẽ thông tin chi tiết các thay đổi nếu có. Sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Về ngoài của sản phẩm dựa trên thay đổi các thiết kế.

Cảm ơn quý khách đã mua ghế massage do công ty chúng tôi sản xuất.

Trước khi sử dụng, quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và sử dụng đúng cách. Sau khi đọc xong, hãy cất ở nơi có thể đọc lại dễ dàng bất cứ lúc nào.

DANH MỤC

Những cảnh báo an toàn quan trọng	1
Cách lắp đặt ghế	7
Tên các bộ phận và chức năng	11
Trước mỗi lần massage	13
Cách điều chỉnh ghế	14
Các thao tác massage cơ bản	15
Chế độ massage tự động	16
Chế độ massage thủ công (bằng tay)	19
Chế độ hoạt động của túi khí	21
Các chức năng khác	23
Vệ sinh và bảo quản	24
Những vấn đề có thể gặp phải	26
Bảo trì và bảo hành	28
Thông số kỹ thuật sản phẩm	29
Điều kiện bảo hành	30

NHỮNG CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ lưu ý an toàn này và sử dụng đúng cách.

Các biện pháp phòng ngừa được nêu ra với mục đích nhắc nhở bạn sử dụng sản phẩm này đúng cách để tránh sự cố ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản.



Cảnh báo:

Nếu sử dụng không đúng cách, người dùng có thể gặp chấn thương không mong muốn, tổn hại đến vật dụng, tài sản xung quanh hiện có.

Ghế massage có chức năng làm ấm nóng nên cần cẩn trọng khi dùng.

GIẢI NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG

	 Cảnh báo hoặc Chú ý (Ví dụ bên trái hiển thị các cảnh báo và lưu ý chung)
	 Hành vi bị cấm (Ví dụ bên trái thể hiện cấm tháo rời)
	 Chỉ dẫn nội dung bắt buộc và hướng dẫn (Ví dụ bên trái cho thấy việc rút phích cắm)



Những trường hợp sau đây phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- ◆ Bệnh nhân ung thư
- ◆ Phụ nữ mang thai hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt
- ◆ Người bị sốt cao
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh cấp tính (đang trong tình trạng đau đớn)
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh loãng xương
- ◆ Bệnh nhân bị rối loạn tri giác
- ◆ Người bị bệnh tim mạch
- ◆ Người bị bệnh thiếu máu
- ◆ Người sử dụng thiết bị tạo nhịp tim (trợ tim) hoặc các thiết bị cấy ghép vào cơ thể
- ◆ Người bị dị dạng, có bất thường hoặc cong vẹo cột sống
- ◆ Người đang điều trị hoặc cảm thấy bất thường về thể chất
- ◆ Người đang điều trị hoặc bị tổn thương trước đó các bộ phận trên cơ thể
- ◆ Người bị rối loạn tuần hoàn máu bàn chân
- ◆ Người khiếm thị

LƯU Ý



Rút nguồn điện ngay lập tức khi sản phẩm không thể hoạt động hoặc sự cố bất thường và liên hệ bộ phận bảo hành kiểm tra, sửa chữa để tránh điện giật, rò rỉ, đoản mạch và cháy nổ.

Khi xoa bóp quanh cổ, chú ý đến chuyển động của con lăn massage và không nên để chế độ xoa bóp quá mạnh. Điều này có thể khiến bạn bị đau, thậm chí chấn thương.

Khi nâng / hạ lưng ghế và chỗ để chân, vui lòng đảm bảo rằng không có người, đồ vật hoặc vật nuôi ở phía trước và dưới chỗ để chân để tránh sự cố xảy ra.

Trước khi sử dụng, kiểm tra lớp da ghế đảm bảo không bị hư hại dẫn đến bị thương hoặc điện giật do rò rỉ (nếu bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức, rút nguồn điện và yêu cầu sửa chữa).

Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng bạn không đeo bất kỳ phụ kiện nào (vòng tay, đồng hồ...) để tránh bị thương.

Chỉ nên massage trong khoảng 15-20 phút, 1 ngày không quá 2 lần, một bộ phận cơ thể trong vòng 5 phút. Xoa bóp liên tục trong thời gian quá dài có thể gây đau cơ và dây thần kinh.

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ bất thường nào trong quá trình massage, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt công tắc nguồn để đề phòng tai nạn do trẻ em nghịch phá.

Đặt ghế massage trên mặt sàn nằm ngang, tránh đặt chỗ sàn bị nghiêng hoặc gồ ghề không bằng phẳng.

	Không nên kéo dây cáp điều khiển quá căng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Vui lòng kiểm tra vị trí của con lăn massage trước khi sử dụng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Di chuyển ghế ổn định để tránh trầy xước bề mặt.
	Không sử dụng nguồn điện vượt quy chuẩn của ghế dẫn tới nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh điện giật, đoản mạch và tia lửa điện.
	Không làm hỏng, tái chế, bẻ cong, kéo căng, xoắn, dính hoặc thắt chặt dây nguồn. Ngoài ra, không để dây điện dưới các vật nặng, đặc biệt không làm vướng hoặc kẹp dây trong quá trình di chuyển. Dây nguồn hỏng có nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Không cho trẻ em sử dụng một mình và đặt ghế tránh xa trẻ nhỏ.
	Không cho trẻ em chơi trên ghế để tránh bị thương hoặc hỏng hóc.
	Không sử dụng thiết bị trị liệu khác trong khi sử dụng ghế massage này.
	Không ngủ gật trong khi xoa bóp vì xoa bóp vô thức có thể gây thương tích hoặc khó chịu khi tỉnh dậy.
	Không sử dụng ghế cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài massage để tránh hỏng hóc hoặc tai nạn.


	Đảm bảo cắm hết phích cắm và đảm bảo không có chân cắm hoặc phích cắm bị kẹt bởi vật thể lạ nguy cơ gây ra điện giật, đoản mạch và hỏa hoạn.
	Không sử dụng gần ngọn lửa trần, chẳng hạn như bếp lò. Không sử dụng khi đang hút thuốc. Không sử dụng trên các thiết bị sưởi ấm, chẳng hạn như chăn điện, vì nó có thể gây ra hỏa hoạn.
	Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người hướng dẫn an toàn và được giám sát trong khi sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị gây lỗi sản phẩm hay bị chấn thương.
	Không kéo da quá mạnh. Không dùng lực hoặc vật sắc nhọn chọc thủng da để tránh bị thương và hồng hóc.
	Không lau bằng xăng, dung dịch pha loãng,... Không xịt thuốc diệt côn trùng để tránh chập điện, phát tia lửa điện.
	Không ngồi trên tựa lưng, tay vịn hoặc gác chân để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Không di chuyển bánh xe hoặc kéo ghế trên bề mặt dễ bị trầy xước, hư hại sàn (như sàn gỗ hoặc thảm).
	Không làm rơi ghế hoặc va đập với lực mạnh để tránh bị thương hoặc hư hỏng ghế.
	Không sử dụng ghế ngay sau khi ăn để tránh cảm giác khó chịu.

	Không di chuyển ghế khi có người đang sử dụng để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Chỉ 01 người sử dụng ghế tại một thời điểm.
	Không kẹp tay và chân vào giữa các con lăn massage để tránh bị thương và khó chịu.
	Không sử dụng ghế khi đeo các vật cứng, chẳng hạn như phụ kiện tóc, vòng tay...
	Không để đầu và tay của bạn dưới chỗ để chân và dưới ghế để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Trong trường hợp mất điện, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh tai nạn khi có điện trở lại.
	Khi rút phích cắm, vui lòng giữ phần phích cắm ở phần nhựa và không kéo dây nguồn, tránh nguy cơ bị điện giật hoặc đứt mạch, đứt dây, có thể gây cháy.
	Khi không sử dụng thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, che phủ cẩn thận vì bụi và hơi ẩm sẽ làm giảm tuổi thọ của ghế.
	Khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngoài ra, không cắm hoặc tháo phích cắm khi tay ướt vì có thể gây điện giật và thương tích.
	Không đặt ở nơi ẩm ướt như phòng tắm vì có thể gây chập điện, cháy nổ, hỏng hóc và rỉ sét.
	Ngoại trừ các kỹ thuật viên dịch vụ, không ai được tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa ghế. Nếu cần sửa chữa thay thế hãy gọi cho nhân viên chăm sóc bảo dưỡng bảo trì nơi mua sản phẩm.

CÁCH LẮP ĐẶT GHẾ


Tháo thân chính và phụ kiện khỏi hộp đóng gói

Thân chính

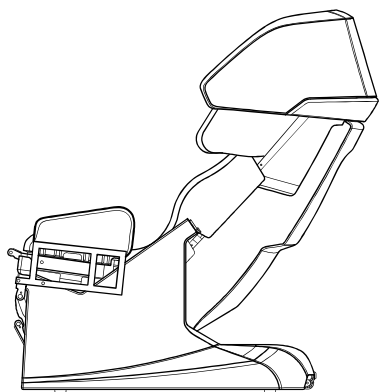


Phụ kiện


2 cánh ghế trái/phải

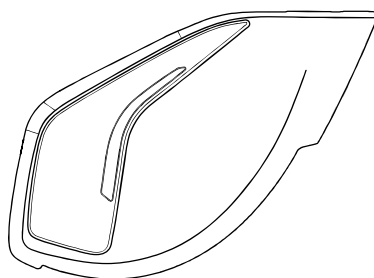


Giá đỡ điều khiển

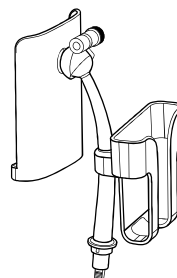


Chân ghế

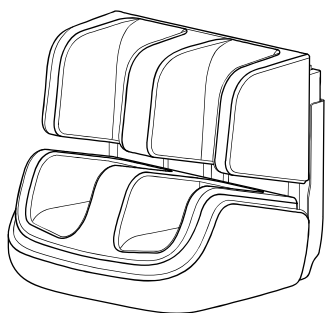


Gối đầu

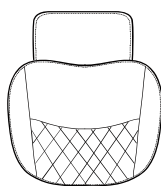

Tấm phủ lót lưng

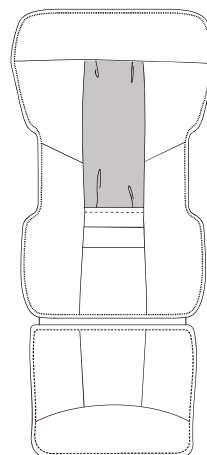


Sách/Tài liệu

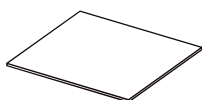

Bộ dụng cụ



Dây điện

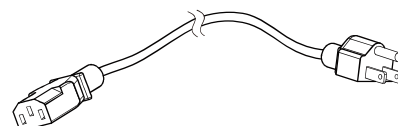

CÁCH LẮP ĐẶT GHẾ

Lắp ráp các bộ phận ghế


I. Lắp đặt các tấm cánh ghế

- Lắp các túi khí, đầu nối đầu vào không khí phải được kết nối với màu sắc tương ứng, sau đó kết nối hai dây và cố định chặt bằng dây nịt. Hình ①

Sau khi kết nối dây với đèn, khóa và cố định bằng nút cố định.

- Cố định hai móc bên trong của cánh ghế vào khung trước, đẩy từ trước ra sau, và cố định ở vai. Hình ②.

Sau đó dùng vít lục giác để khóa. Hình ③

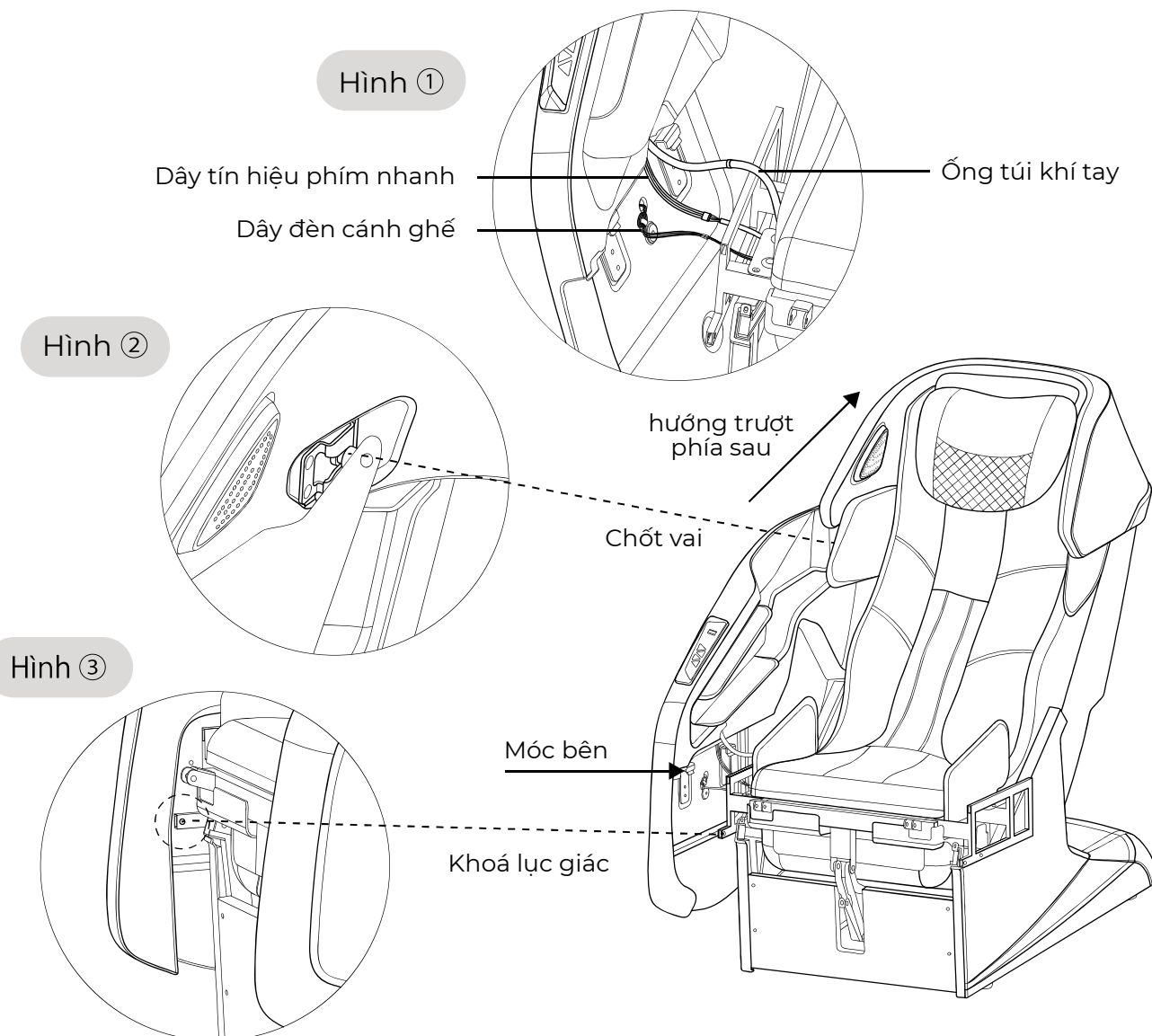


CÁCH LẮP ĐẶT GHẾ

Lắp ráp các bộ phận ghế


II. Lắp đặt chân ghế phần massage xa chân

- Căn chỉnh phần chân với các lỗ kết nối ở cả hai bên của ghế và chèn chốt và khoá chốt. Hình ①
- Sử dụng chốt và khoá chốt để gắn thanh đẩy ở thân ghế với chân. Hình ②
- Lắp các đầu túi khí với nhau. Hai đầu nối phải được với các màu tương ứng. Sau đó kết nối chạc 3 (màu vàng), sử dụng khóa kéo để che sau khi nối.
- Nối đệm ngồi với khoá kéo phần chân.


Hình ① Vị trí lắp đặt phần chân

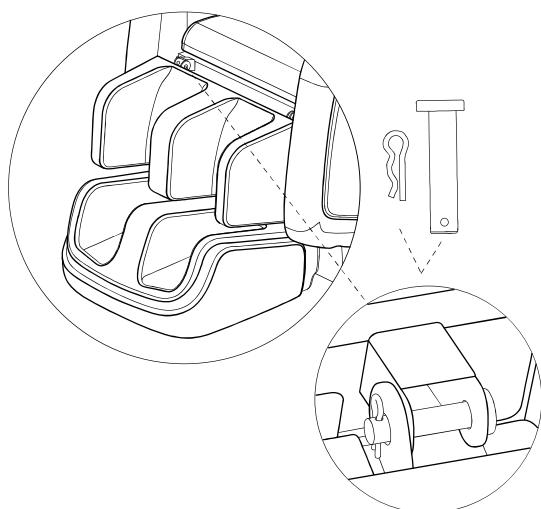

Hình ② Vị trí lắp đặt của thanh đẩy phần chân

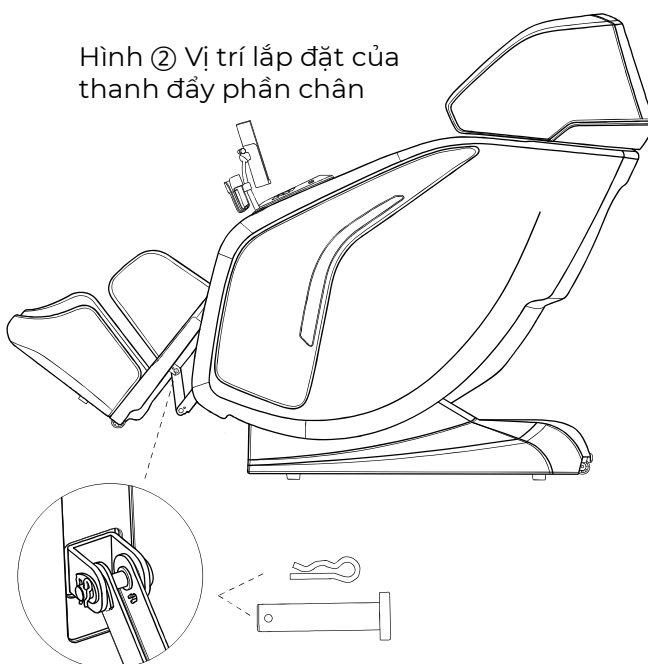

III. Lắp đặt giá đỡ bảng điều khiển

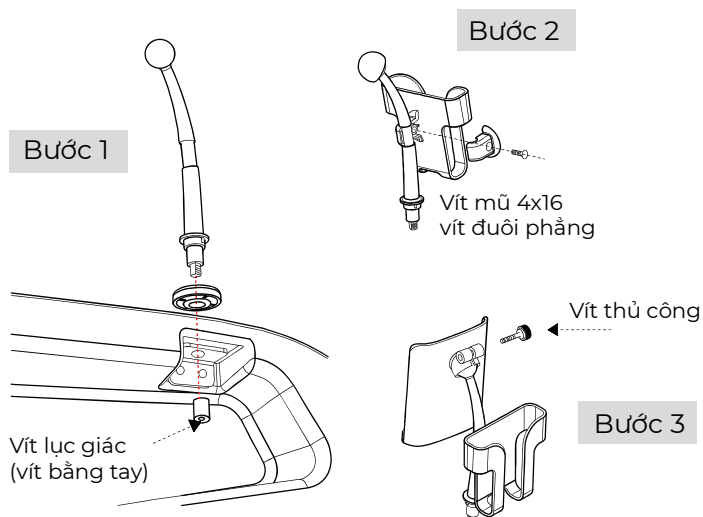

Bước 1: Sử dụng vít hình lục giác (vít bằng tay) để cố định cần điều khiển với tay vịn bên trái).

Bước 2: Sử dụng vít mũ 4x16 gắn giá đỡ điện thoại vào cần điều khiển.


Bước 3: Sử dụng vít thủ công để cố định giá đỡ điều khiển vào cần điều khiển.

CÁCH LẮP ĐẶT GHẾ

Vị trí đặt ghế massage


Vui lòng đặt ghế massage ở mặt phẳng, xung quanh cần đảm bảo khoảng trống để đặt ghế massage.

Khi đặt ghế massage, đảm bảo đủ không gian xung quanh ghế để thoải mái cho việc duỗi phần chân và tựa lưng của ghế ra sau trong các chế độ kéo giãn. Nên sử dụng thảm lót dưới ghế massage để tránh làm hỏng bề mặt.

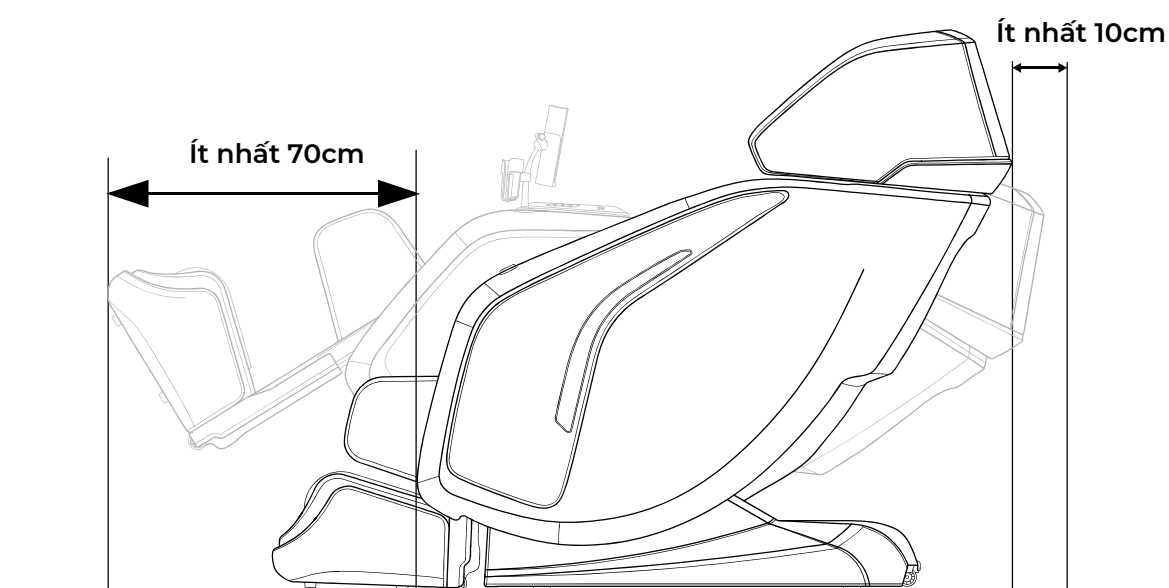

Di chuyển ghế

Nghiêng ghế về phía sau khoảng 45 ° và sử dụng bánh xe để đẩy về phía trước hoặc kéo về phía sau vào vị trí thích hợp.


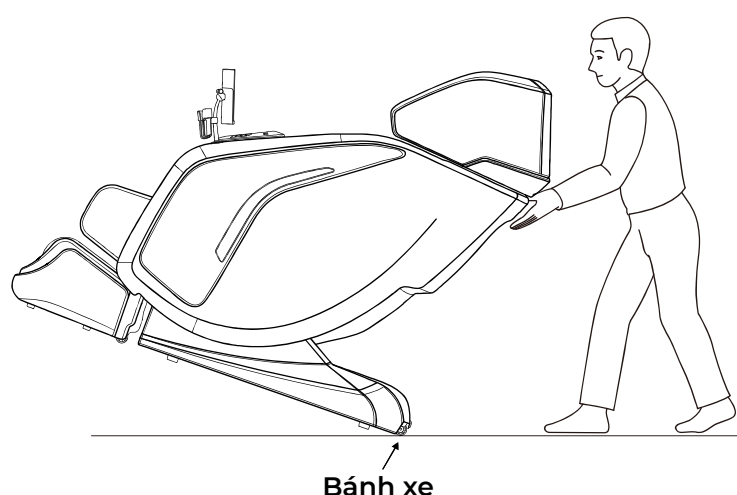


Xin lưu ý!


- Không di chuyển ghế massage khi có người đang ngồi trên ghế.
- Không nâng ghế và chõ để chân khi đang di chuyển.
- Khi di chuyển, đặt bộ điều khiển trên đệm ghế để tránh việc rơi xuống đất.

TÊN CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG GHẾ

Các bộ phận ghế

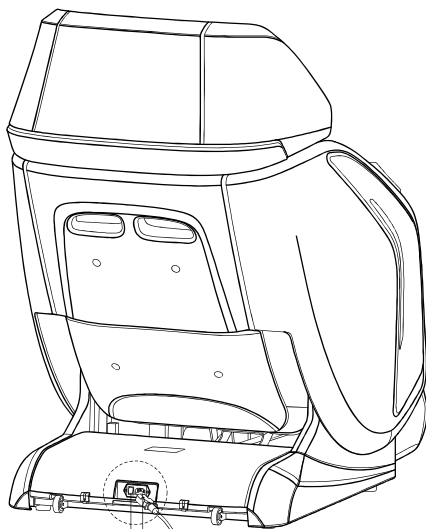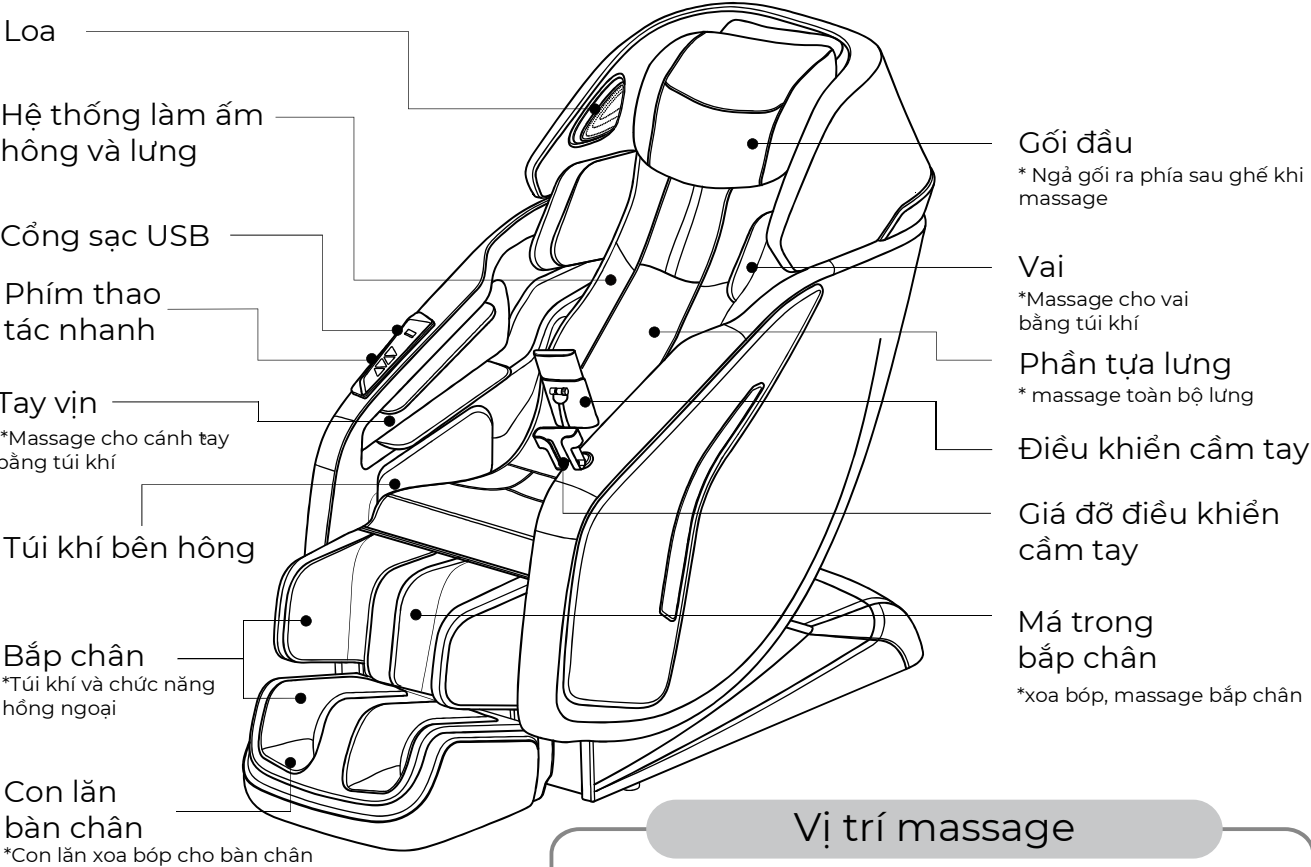


Vị trí massage

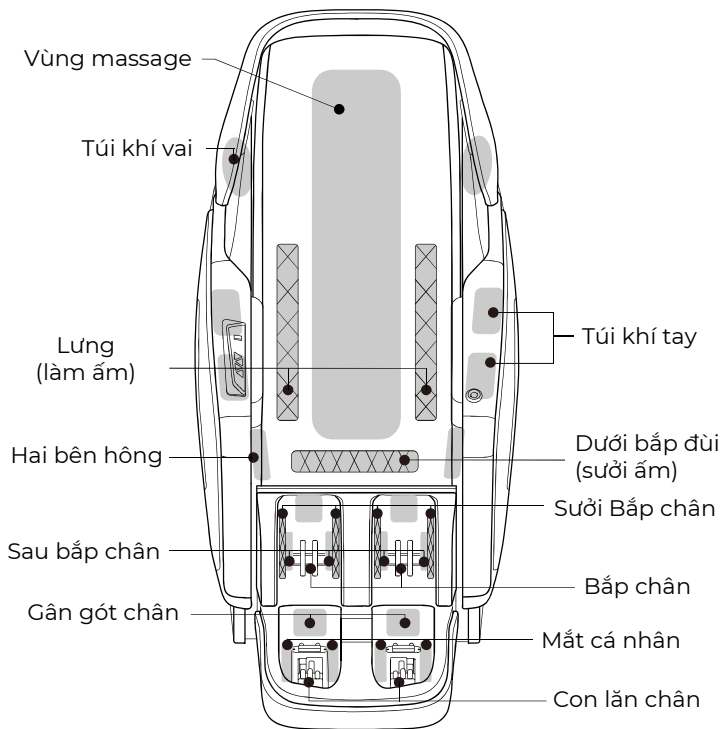

TÊN CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG GHẾ

Ngôn ngữ mặc định trên bảng điều khiển là Tiếng Việt. Tuy nhiên các hình minh họa bảng điều khiển trong tài liệu sử dụng tiếng Anh để bạn hiểu rõ hơn các chức năng và thao tác của ghế.


Bảng điều khiển

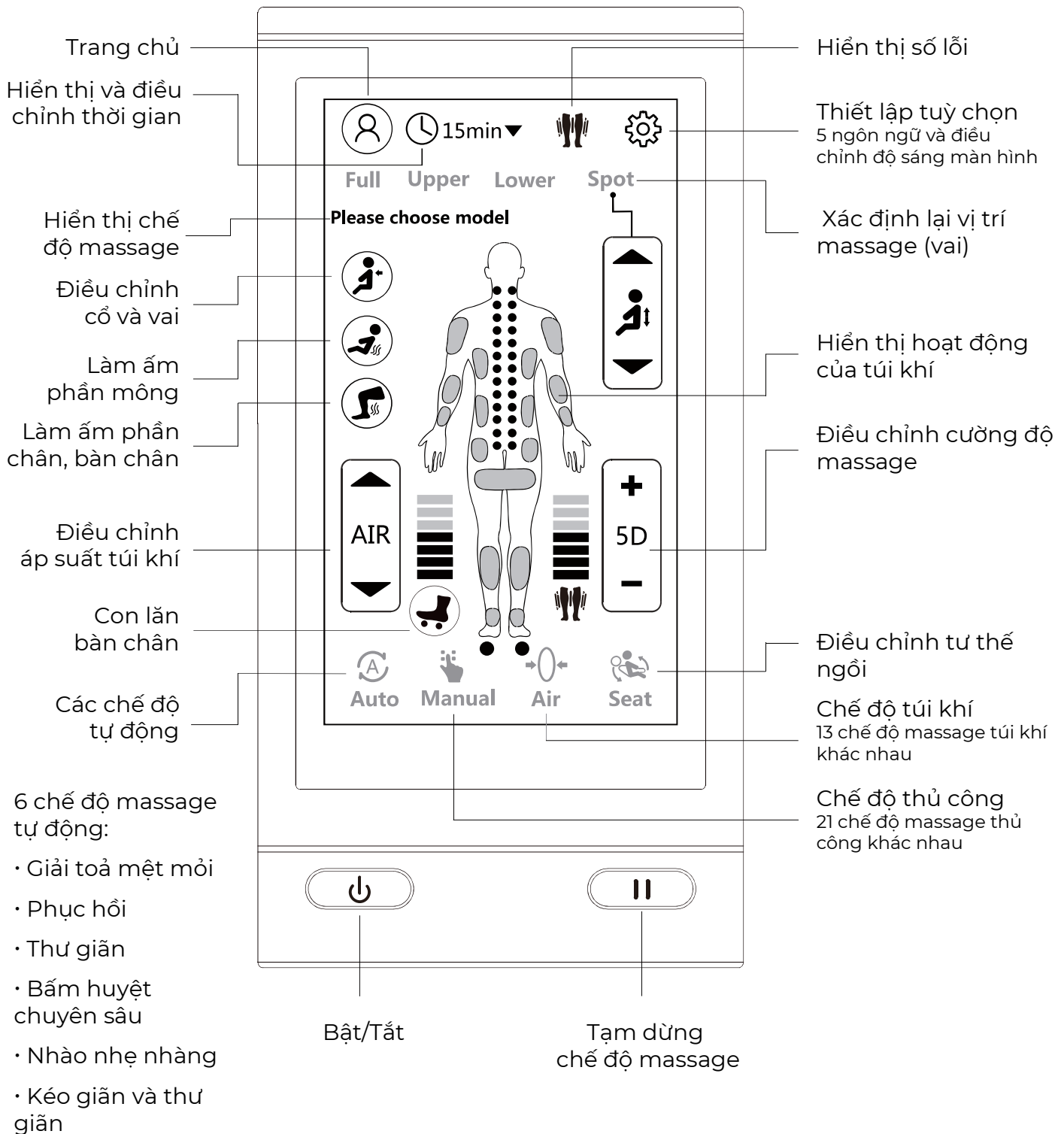

TRƯỚC MỖI LẦN MASSAGE

Kết nối với nguồn điện

1. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.
2. Bật công tắc nguồn (nằm bên dưới mặt sau của chỗ ngồi).

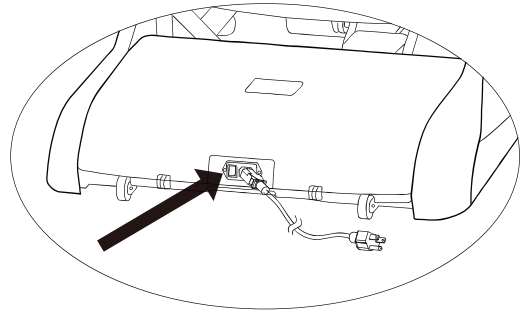

Các mục cần kiểm tra:

1. Kiểm tra môi trường xung quanh Đảm bảo không có người, vật nuôi và đồ vật xung quanh lưng ghế massage hoặc bên dưới chỗ để chân.

2. Kiểm tra tình trạng ghế massage

- ◆ Nâng miếng đệm sau, kiểm tra nắp sau và các bộ phận của ghế
 - Nếu thấy có gì bất thường thì ngừng sử dụng lập tức và gọi cho bộ phận sửa chữa.
- ◆ Kiểm tra dây nguồn, dây bảng điều khiển và nguồn cắm. Đồng thời kiểm tra xem phích cắm điện có bị kẹt bởi tóc, bụi bặm, rác hay không.
- ◆ Ngồi đúng tư thế chỗ đặt lưng, chân; đảm bảo ghế ở trạng thái ban đầu, không bị nâng lên hay hạ xuống.
- ◆ Nếu thấy trạng thái ghế bị nâng lên hay hạ xuống hãy thao tác nút  (bật / tắt) để đưa ghế về vị trí ban đầu.

(*) Nhấn nút bật / tắt, tựa lưng cũng sẽ được thiết lập lại.

CÁCH ĐIỀU CHỈNH GHẾ

Cách điều chỉnh tư thế ngồi

A. Điều khiển bằng tay (Giao diện điều chỉnh tư thế ngồi)

1. Nhấn nút  để vào giao diện tư thế ngồi với 4 chế độ:

- **G** Chế độ Zero Gravity
-  Đưa nôi
-  Ngả lưng
-  Ngồi dậy

2. Nhấn giữ 6 phím điều hướng như hình (lên, xuống) sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.


3. Nhấn dấu tích  để xác nhận.

Sau 10 giây không xác nhận, hệ thống sẽ tự động bỏ qua, không ghi nhận chọn lựa của bạn.

Nâng/Hạ lưng


Nâng/Hạ chân

Mở rộng chân

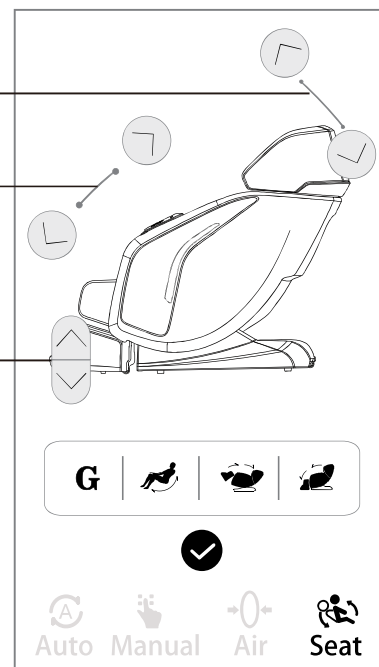

B. Những nút điều chỉnh nhanh

1. Nút  Bật / tắt ghế massage
2. Nút  Tạm dừng sử dụng
3. Nút **AUTO** Chế độ tự động thiết lập mặc định
4. Nút **G** Chế độ Zero Gravity

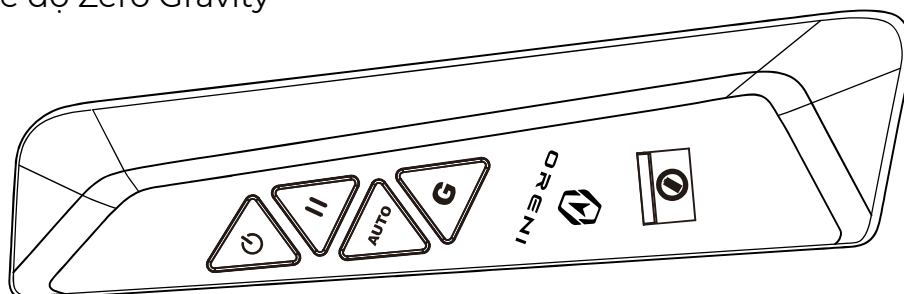

⚠️ Chú ý!

- Không ngồi tựa lưng ghế, ngồi lên tay vịn, phần chân để tránh bị ngã, chấn thương vì ghế bị lật úp.
- Khi bạn ngồi xuống thì phải quan sát chú ý xung quanh xem có đồ vật nào khác trong ghế hay xung quanh ghế hay không.



CÁC THAO TÁC MASSAGE CƠ BẢN

Massage cơ bản

- **Nhào nặn lên**
Động tác massage từ dưới lên trên
- **Nhào nặn xuống**
Động tác massage từ trên xuống dưới
- **Lăn**
Lăn massage, kéo giãn cột sống
- **Ấn chạm**
Ấn chạm lên cơ thể để thư giãn
- **Xoay miết**
Kết hợp nhào và lăn tròn
- **Nhào nặn sâu phía trên**
Động tác massage từ dưới lên
- **Nhào nặn sâu phía dưới**
Động tác massage từ dưới lên
- **Thư giãn cổ**
Massage thư giãn toàn bộ vùng cổ
- **Thư giãn vùng eo**
Massage thư giãn toàn bộ vùng hông
- **Bấm huyệt (Shiatsu)**
Massage chuyên sâu

Công nghệ massage đặc biệt

- **Nhào nặn lên trên + 5D**
Động tác massage từ dưới lên
- **Nhào nặn xuống dưới + 5D**
Động tác massage từ trên xuống dưới
- **Ấn chạm + 5D**
Ấn chạm lên cơ thể để thư giãn
- **Xoay miết**
Kết hợp nhào và lăn tròn
- **Lăn lên + kéo giãn**
Lăn lên trên, day miết lên và xuống
- **Lăn xuống + kéo giãn**
Miết cơ trên trên xuống dưới
- **Ấn chạm + kéo giãn**
Ấn chạm nhịp nhàng lên cơ thể từ dưới lên trên
- **Xoay tròn + kéo giãn**
Nhào nặn trong quá trình massage từ dưới lên trên
- **Lăn trên**
Từ trên xuống, tập trung ở hai vai với chuyển động lăn nhịp nhàng
- **Ấn chạm**
Bắt đầu từ trên xuống, xoa bóp nhịp nhàng
- **Thư giãn phần thắt lưng**
Tập trung nhào nặn vùng thắt lưng, hông

Massage bằng túi khí

- **Phần vai**
Tập trung massage hai bên vai
- **Phần tay**
Tập trung massage tay cho bạn
- **Rung**
Túi khí bơm đầy hơi, tạo rung nhịp nhàng
- **Nén bóp**
Túi khí ở thắt lưng, hông được bơm căng tạo nên áp suất nén bóp vùng đó
- **Duỗi căng**
Túi khí căng, chân ghế hạ xuống, kéo và thư giãn chân
- **Vùng eo hông**
Đẩy từ phía sau
- **Chân**
Tập trung xoa bóp mắt cá chân

Chế độ massage khác


- **Làm ấm lưng**
Làm ấm lưng và thúc đẩy máu lưu thông
- **Nhào nặn kết hợp làm ấm**
Massage làm ấm, kích thích lưu thông máu
- **Con lăn chân**
Túi khí căng, chân ghế hạ xuống, kéo và thư giãn chân
- **Nhào nặn**
Đẩy từ phía sau

CÁC CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

Khi bắt đầu

Kết nối nguồn điện với ghế massage.

Nhấn nút  (Bật / Tắt), màn hình cảm ứng sẽ hiển thị như sau:

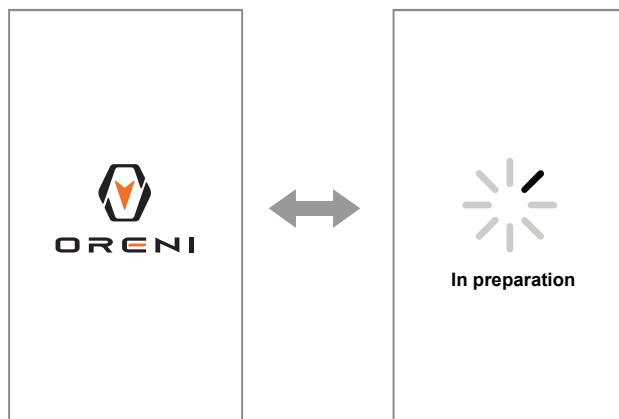


1. Nhấn chế độ tự động  trên màn hình để vào giao diện:




- Có 6 chế độ massage tự động cho bạn: **Giải toả mệt mỏi, Phục hồi, Thư giãn, Bấm huyết chuyên sâu, Nhào nhẹ nhàng, Kéo giãn và thư giãn**
- Sau khi chọn chế độ mong muốn, xác nhận bằng nút  để xác nhận (trong 10 giây nếu không thao tác sẽ tự động thoát).
- Sau khi chế độ tự động được chọn, ghế massage sẽ thực hiện dò tìm huyết đạo, xác định các vị trí vai, cổ và đường cong lưng.

(*) Nếu không thể phát hiện 4 lần liên tiếp, hệ thống sẽ được thiết lập lại.

(*) Nếu thời gian còn lại ít hơn 5 phút, bộ đếm thời gian sẽ tự động điều chỉnh thành 15 phút.

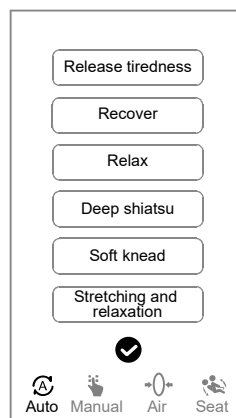


2. Phát hiện vị trí vai và đường cong cột sống lưng

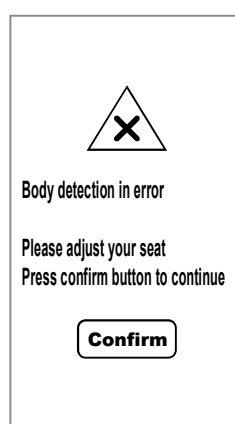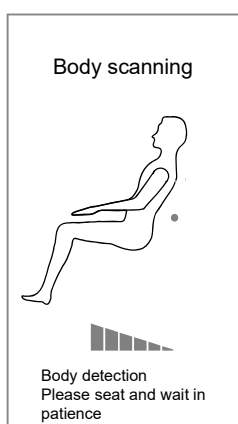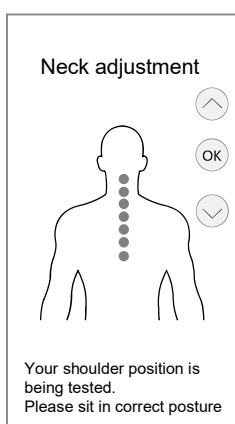


- Sau khi phát hiện vai thông qua dấu chấm, bạn có thể nhấn mũi tên lên và xuống để điều chỉnh phù hợp vị trí chính xác cần massage, sau đó nhấn phím OK để xác nhận.
- Trong quá trình phát hiện hình dạng cơ thể, đèn phát hiện cho biết vị trí phát hiện được.
(*) Khi không ngồi trên ghế massage hoặc khi không thể phát hiện được hình dạng cơ thể, hệ thống sẽ thông báo sự cố. Lúc này, bạn chạm vào nút Xác nhận trên màn hình để kiểm tra lại.
- Khi kiểm tra hoàn tất, chạm vào nút  để xác nhận. Nếu bạn không xác nhận trong vòng 10 giây, hệ thống sẽ tự động thoát.

CÁC CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

3. Quá trình dò tìm phát hiện kết thúc, màn hình sẽ hiển thị đường cong cột sống của bạn. Sau đó, ghế sẽ tự động khởi động chế độ massage dựa theo đường cong đó.

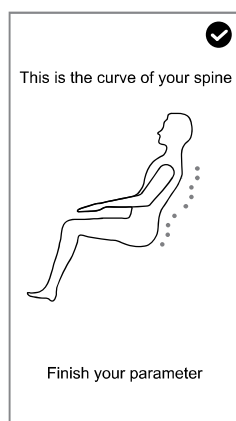

4. Màn hình sẽ hiển thị chế độ massage và các thông số cho bạn theo dõi:

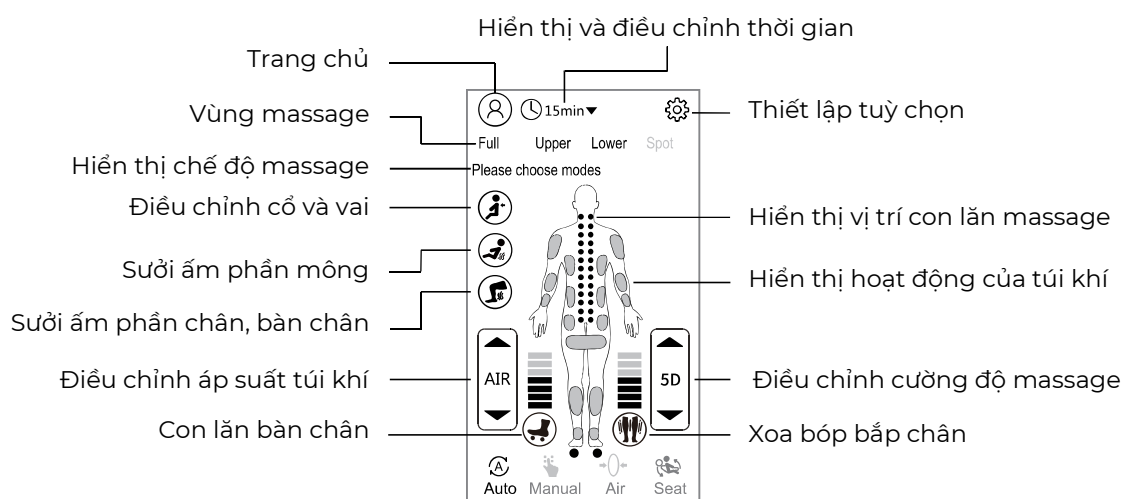

• **Vùng massage:** Ở chế độ tự động, có thể tùy chọn vị trí massage các vùng trên cơ thể: toàn thân (**Full**), vai và cổ (**Upper**), mông và hông (**Lower**).

• **Điều chỉnh vai và cổ:** Nhấn nút  để vào khu vực tương ứng trên bảng điều khiển để chỉnh vị trí massage cho vai.

• **Sưởi ấm phần mông:** Nhấn nút  để bật / tắt chế độ làm ấm mông bằng tia hồng ngoại.

• **Sưởi ấm phần chân, bàn chân:** Nhấn nút  để bật / tắt chế độ làm ấm bắp chân bằng tia hồng ngoại.

CÁC CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

- **Điều chỉnh áp suất túi khí:** Điều chỉnh bằng cách nhấn các mũi tên ▲ ▼ tăng giảm các vạch ngang trên màn hình điều khiển. Mức độ nén của áp suất túi khí được hiển thị trên màn hình.

- **Điều chỉnh cường độ massage:** Điều chỉnh bằng cách nhấn các mũi tên ▲ ▼ tăng giảm các vạch ngang trên màn hình điều khiển. Có 7 mức cường độ bạn có thể điều chỉnh khi massage.

- **Con lăn bàn chân:** Chạm vào  để bật / tắt tính năng massage con lăn dưới chân.

- **Xoa bóp bắp chân:** Chạm vào  để bật / tắt tính năng nhào nặn, xoa bóp cho đôi chân.

- **Hiển thị và điều chỉnh thời gian:** Thông thường mức thời gian cho mỗi lần massage là 15 phút. Bạn có thể điều chỉnh thời gian này bằng cách tăng, giảm tối đa là 30 phút và thấp nhất là 15 phút. Nếu không chọn thì sau 10 giây, hệ thống sẽ tự động thoát.

- **Thiết lập tùy chọn (Cài đặt):** Chạm vào  bên trên góc phải màn hình để vào phần cài đặt.

- **Biểu tượng hình người** sẽ hiển thị vị trí của con lăn và túi khí tương ứng đang thực hiện các động tác massage cho bạn.


5. Sau khi kết thúc quá trình massage, con lăn massage sẽ tự động trở về vị trí ban đầu.

6. Vui lòng tắt nguồn sau khi sử dụng.

CHẾ ĐỘ MASSAGE THỦ CÔNG (BẰNG TAY)


Khi mới bắt đầu

Khi nhấn nút khởi động , màn hình bảng điều khiển sẽ hiển thị như bên dưới:

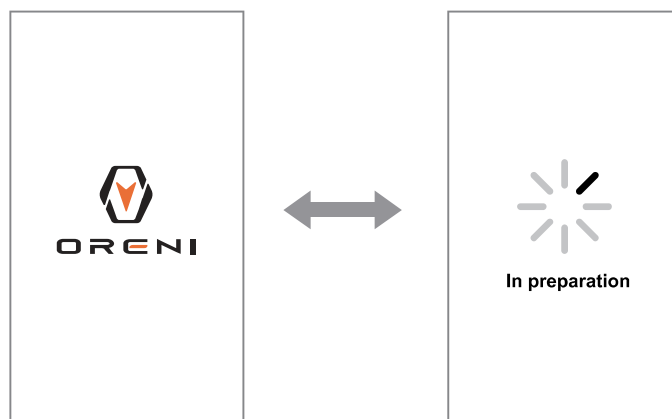


1. Nhấn chế độ thủ công  trên màn hình để vào giao diện:

- Có 10 kỹ thuật trong chọn thủ công: **Nhào lên, Nhào xuống, Bấm + Miết, Đấm, Nhào + Đấm, Nhào sâu 1, Nhào sâu 2, Thư giãn gáy, Thả lỏng lưng, Bấm.**
- Có 3 kỹ thuật đặc biệt: **3D, Thư giãn, Sâu.**
- Bạn có thể chọn kết hợp với nhau liên quan đến tốc độ massage, phạm vi massage.
- Nhấn vào  để xác nhận chọn chế độ, màn hình sẽ trở về giao diện trang chủ.

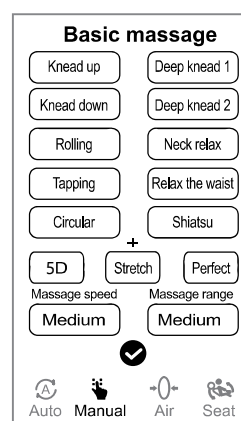

2. Màn hình sẽ hiển thị chế độ massage và các thông số cho bạn theo dõi:

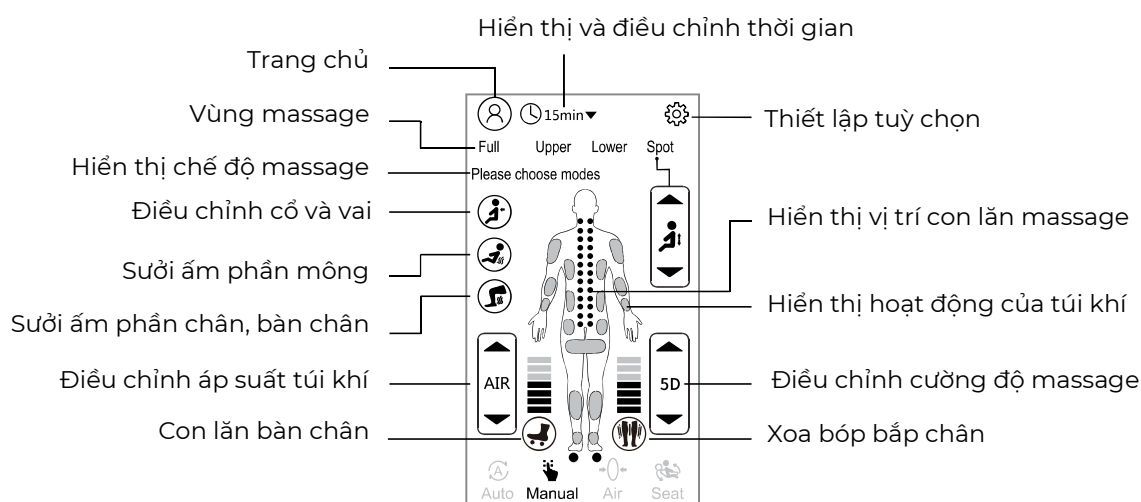

CHẾ ĐỘ MASSAGE THỦ CÔNG (BẰNG TAY)

• **Vùng massage:** Ở chế độ tự động, có thể tùy chọn vị trí massage các vùng trên cơ thể: toàn thân (**Full**), vai và cổ (**Upper**), mông và hông (**Lower**), điểm massage cụ thể dọc theo cột sống (**Spot**).

• **Điều chỉnh vai và cổ:** Nhấn nút  để vào khu vực tương ứng trên bảng điều khiển để chỉnh vị trí massage cho vai.

• **Sưởi ấm phần mông:** Nhấn nút  để bật / tắt chế độ làm ấm mông bằng tia hồng ngoại.

• **Sưởi ấm phần chân, bàn chân:** Nhấn nút  để bật / tắt chế độ làm ấm bắp chân bằng tia hồng ngoại.

• **Điều chỉnh áp suất túi khí:** Điều chỉnh bằng cách nhấn các mũi tên ▲ ▼ tăng giảm các vạch ngang trên màn hình điều khiển. Mức độ nén của áp suất túi khí được hiển thị trên màn hình.

• **Điều chỉnh cường độ massage:** Điều chỉnh bằng cách nhấn các mũi tên ▲ ▼ tăng giảm các vạch ngang trên màn hình điều khiển. Có 7 mức cường độ bạn có thể điều chỉnh khi massage.

• **Con lăn bàn chân:** Chạm vào  để bật / tắt tính năng massage con lăn dưới chân.

• **Xoa bóp bắp chân:** Chạm vào  để bật / tắt tính năng nhào nặn, xoa bóp cho đôi chân.

• **Hiển thị và điều chỉnh thời gian:** Thông thường mức thời gian cho mỗi lần massage là 15 phút. Bạn có thể điều chỉnh thời gian này bằng cách tăng, giảm tối đa là 30 phút và thấp nhất là 15 phút. Nếu không chọn thì sau 10 giây, hệ thống sẽ tự động thoát.

• **Thiết lập tùy chọn (Cài đặt):** Chạm vào  bên trên góc phải màn hình để vào phần cài đặt.

• **Biểu tượng hình người** sẽ hiển thị vị trí của con lăn và túi khí tương ứng đang thực hiện các động tác massage cho bạn.


3. Sau khi kết thúc quá trình massage, con lăn massage sẽ tự động trở về vị trí ban đầu.

4. Vui lòng tắt nguồn sau khi sử dụng.

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TÚI KHÍ


Khi mới bắt đầu

Khi nhấn nút khởi động , màn hình bảng điều khiển sẽ hiển thị như bên dưới:

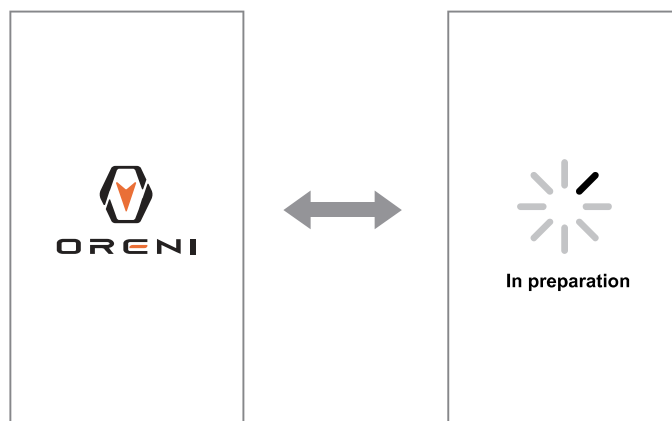


1. Nhấn chế độ túi khí  trên màn hình để vào giao diện:

- Có 6 chế độ massage túi khí bao gồm: **Toàn thân, Bình minh, Thư giãn, Nghỉ trưa, Tuần hoàn máu, Ngủ đêm**. Có thể kết hợp với 2 kỹ thuật đặc biệt: **Rung, Thư giãn**.
- Có 4 chế độ massage cục bộ cho các vùng: **Vai, Lưng và hông, Tay, Chân**.
- Nhấn vào  để xác nhận chọn chế độ, màn hình sẽ trở về giao diện trang chủ.

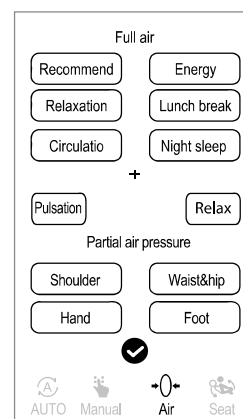

2. Màn hình sẽ hiển thị chế độ massage và các thông số cho bạn theo dõi:

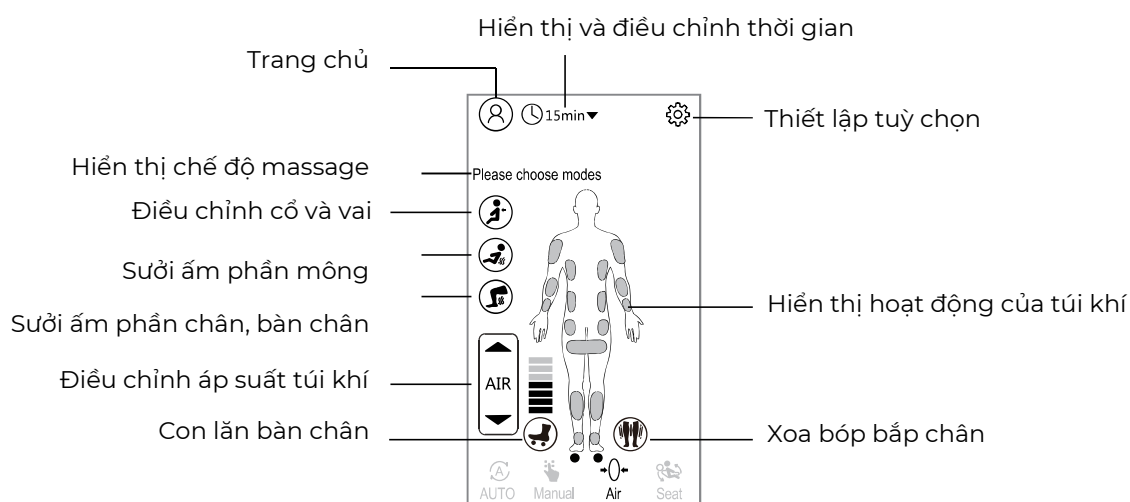

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TÚI KHÍ

- **Điều chỉnh vai và cổ:** Nhấn nút  để vào khu vực tương ứng trên bảng điều khiển để chỉnh vị trí massage cho vai.
- **Sưởi ấm phần mông:** Nhấn nút  để bật / tắt chế độ làm ấm mông bằng tia hồng ngoại.
- **Sưởi ấm phần chân, bàn chân:** Nhấn nút  để bật / tắt chế độ làm ấm bắp chân bằng tia hồng ngoại.
- **Điều chỉnh áp suất túi khí:** Điều chỉnh bằng cách nhấn các mũi tên ▲ ▼ tăng giảm các vạch ngang trên màn hình điều khiển. Mức độ nén của áp suất túi khí được hiển thị trên màn hình.
- **Con lăn bàn chân:** Chạm vào  để bật / tắt tính năng massage con lăn dưới chân.
- **Xoa bóp bắp chân:** Chạm vào  để bật / tắt tính năng nhào nặn, xoa bóp cho đôi chân.
- **Hiển thị và điều chỉnh thời gian:** Thông thường mức thời gian cho mỗi lần massage là 15 phút. Bạn có thể điều chỉnh thời gian này bằng cách tăng, giảm tối đa là 30 phút và thấp nhất là 15 phút. Nếu không chọn thì sau 10 giây, hệ thống sẽ tự động thoát.
- **Thiết lập tùy chọn(Cài đặt):** Chạm vào  bên trên góc phải màn hình để vào phần cài đặt.
- **Biểu tượng hình người** sẽ hiển thị vị trí của túi khí tương ứng đang thực hiện động tác massage cho bạn.


3. Sau khi kết thúc quá trình massage, con lăn massage sẽ tự động trở về vị trí ban đầu.

4. Vui lòng tắt nguồn sau khi sử dụng.

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

1. Cài đặt

- Có 5 ngôn ngữ để bạn lựa chọn bao gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh
- Tự động nâng chân: Khi khởi động ghế massage, nút Power trên bảng điều khiển ghế sẽ tự động nâng phần chân, đi vào chế độ tự động
- Tự động lưu chế độ massage: Sau khi tắt ghế massage, chế độ bạn đang sử dụng sẽ được lưu lại. Khi sử dụng tiếp sẽ giữ ở chế độ đó. Nếu muốn thay đổi bạn cần điều chỉnh lại.
- Độ sáng màn hình: Bạn có thể cài đặt độ sáng màn hình, tổng cộng có 7 mức theo đánh số.
- Đèn chiếu sáng: Để bật đèn bluetooth ghế massage và hiển thị đèn logo "ORENI". Khi chạm vào màn hình, đèn bluetooth và đèn Logo sẽ được bật lên, có 15 loại đèn bluetooth để bạn lựa chọn. Khi đèn bluetooth tắt, đèn Logo cũng sẽ tắt.
- Nhấn hình  để xác nhận chọn lựa, nếu sau 10 giây không thao tác, hệ thống sẽ tự động thoát ra.

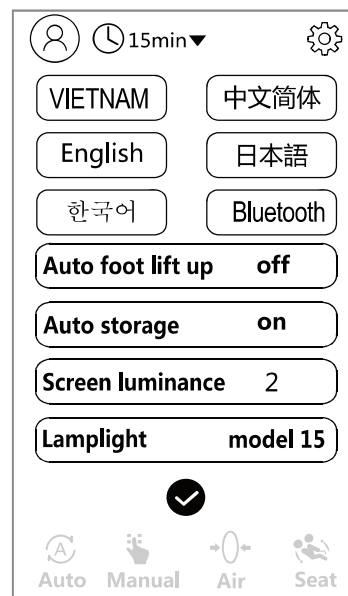


2. Bluetooth

- Bật tính năng bluetooth trên điện thoại, kết nối với bluetooth tên **OR-500**, nhạc trên điện thoại sẽ phát ra loa của ghế massage ở 2 bên cạnh tai và bạn sẽ cảm nhận rõ âm thanh.

3. Thời gian

- Có 4 mức độ thời gian để bạn lựa chọn (15 phút, 20 phút, 25 phút và 30 phút), sau khi lựa chọn thời gian, màn hình giao diện sẽ tự động trở về giao diện chính.
- Nếu 10 giây bạn không thao tác trên màn hình điều khiển, hệ thống sẽ tự động thoát khỏi giao diện chế độ đang dùng.

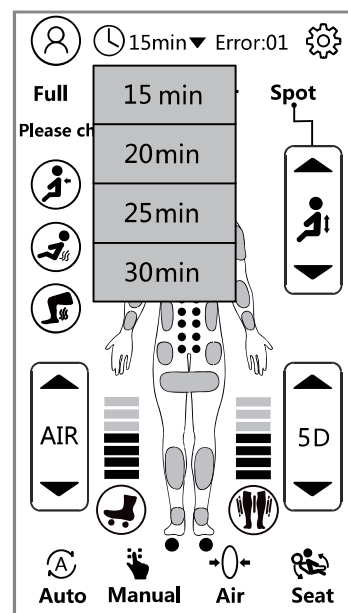


Tạm dừng massage

- Nhấn BẬT / TẮT  - các con lăn massage sẽ quay trở lại vị trí ban đầu
- Nhấn TẠM DỪNG  - các con lăn massage sẽ dừng lại ở vị trí đang thực hiện chế độ massage lúc đó

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Làm sạch da ghế, lau sạch da ghế bằng vải khô mềm.

- Không lau sản phẩm bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.
- Khi sử dụng sản phẩm vệ sinh đồ da được bán trên thị trường, hãy làm đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Nếu da ghế bẩn, bạn có thể áp dụng bước dưới đây:
 - Bước 1: Ngâm một miếng vải mềm vào dung dịch chất tẩy rửa trung tính từ 3% đến 5% và nước ấm, sau đó vắt khô.
 - Bước 2: Lau bề mặt da ghế bằng vải mềm ẩm có chứa dung dịch trên.
 - Bước 3: Lau ghế massage một lần nữa bằng vải mềm khô để loại bỏ cặn bẩn.
 - Bước 4: Để da ghế tự khô trong không khí một khoảng thời gian từ 15-20 phút.

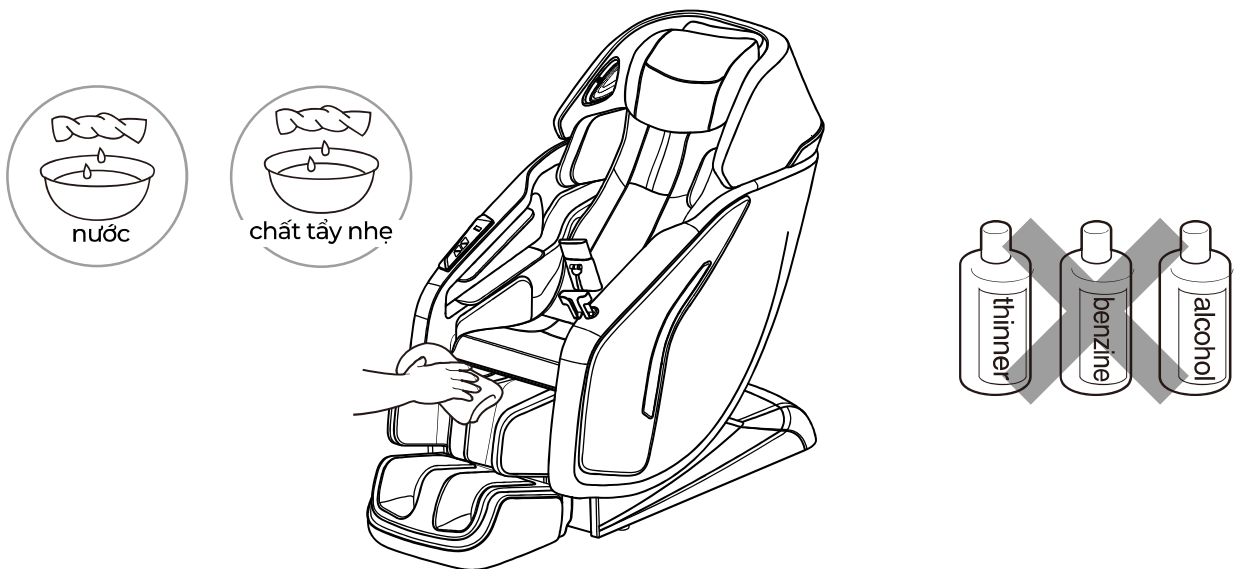


- Không làm khô bề mặt da ghế massage bằng máy sấy tóc.
- Chú ý là màu vải có thể bám lên bề mặt da ghế, hãy cẩn thận khi lau sản phẩm bằng vải denim hoặc vải màu.

Vệ sinh các phần ghế massage có chất liệu bằng nhựa thực hiện theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Ngâm một mảnh vải mềm trong nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính, vắt kiệt và lau các bộ phận ghế massage bằng nhựa một cách nhẹ nhàng. Không lau ghế massage bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.


- Bước 2: Lau các cặn bẩn trên ghế bằng khăn mềm đã được ngâm trong nước sạch và vắt khô. Dùng miếng vải khô để lau bảng điều khiển.
- Bước 3: Để một khoảng thời gian trong không khí cho ghế massage được khô hoàn toàn.

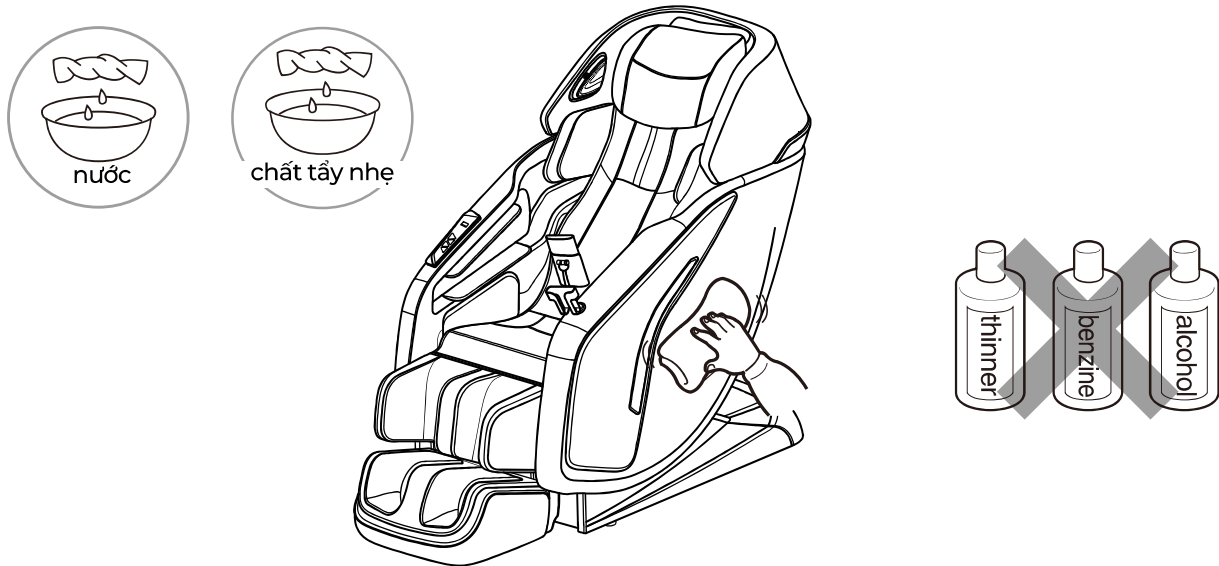

Vệ sinh các bộ phận bằng vải trên ghế massage:

- Tháo khăn phủ chân ra khỏi ghế
- Giặt tay và phơi khô trong không khí
- Phủ vải lên chân ghế như cũ

Vỏ vải có thể tháo rời
và giặt được

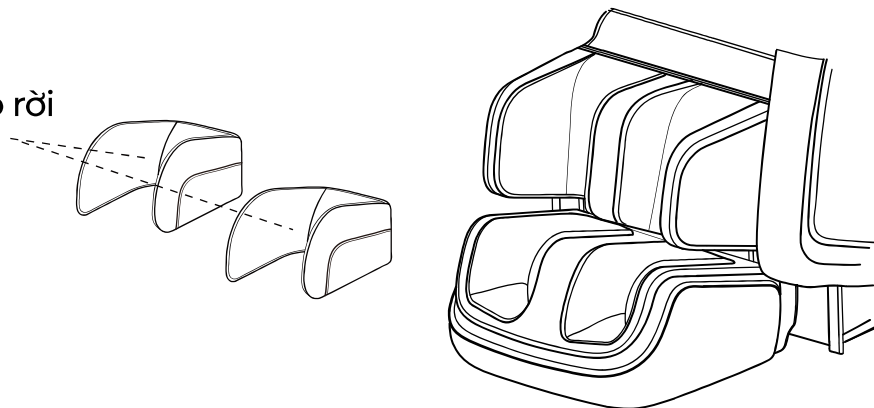

Bảo quản

Sau khi lau sạch vết bẩn và bụi, hãy để ghế ở nơi khô ráo.

Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bạn nên đặt một tấm vải phủ lên trên để tránh bụi bám bám dính.

Lưu ý: Không để ghế dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài hoặc gần những nơi có nhiệt độ cao như lò sưởi, bếp lò để tránh bị phai màu, hư hỏng.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ GẶP PHẢI



Không được tháo rời, tự sửa chữa hoặc điều chỉnh ghế khi chưa có hiểu biết. Điều này có thể gây ra chập điện khiến bạn bị thương và làm hư hại sản phẩm.

Trong quá trình hoạt động của ghế massage, những âm thanh có thể phát ra liên quan đến túi khí hoặc cơ chế massage đặc biệt.

- Âm thanh của con lăn massage di chuyển lên xuống.
- Âm thanh của động cơ trong quá trình massage.
- Âm thanh ma sát của con lăn massage và áo bọc ghế (đặc biệt khi xoa bóp).
- Tiếng vỗ và xoa bóp theo hình tròn (đặc biệt khi di chuyển từ vai ra sau).
- Tốc độ massage khác nhau tạo ra mức độ âm thanh khác nhau.
- Âm thanh động cơ khi tăng tải.
- Trong chương trình tự động, âm thanh của các con lăn massage sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với hình dáng cơ thể của người dùng.
- Âm thanh trong quá trình xoa bóp bằng túi khí.
- Tiếng ma sát từ phần lưng và thành ghế khi nâng ghế ngả phía sau.
- Con lăn massage bên trái và bên phải có độ cao khác nhau sẽ có âm thanh ở mức độ khác nhau.

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân lỗi	Khắc phục sự cố	Trang tham khảo
Ghế massage không hoạt động	Chưa cắm phích cắm điện hoặc phích cắm điện bị tuột	Cắm phích cắm điện vào ổ cắm	13
	Chưa bật công tắc nguồn bên dưới lưng ghế	Bật công tắc nguồn	13
Ghế Massage tạm dừng hoặc dừng hẳn (Bộ điều khiển không hoạt động)	Lưng của ghế có tựa vào tường hoặc vật khác.	- Di chuyển ghế massage để đảm bảo có đủ không gian xung quanh - Tắt công tắc nguồn bên dưới lưng ghế, sau đó bật lại.	10, 13
	Lực tác động lên ghế có quá mạnh (Để đảm bảo an toàn, khi có ngoại lực bất thường tác động mạnh, ghế massage sẽ tự động kích hoạt cơ chế an toàn là dừng mọi chức năng massage)	- Rời khỏi ghế, tắt công tắc nguồn, sau đó bật lại - Chọn một chức năng và bắt đầu lại	13
Tựa lưng không thể hạ xuống hoặc nâng lên	Phích cắm điện bị lỏng	Cắm phích cắm điện vào ổ cắm	13, 14
	Lưng của ghế có tựa vào tường hoặc vật khác	Di chuyển ghế massage để đảm bảo có đủ không gian xung quanh.	10, 13, 14

Khi có bất thường xuất hiện trên màn hình mà bạn không nắm rõ, hãy nhấp vào nút xác nhận  hoặc để tự động về trang chính sau 10 giây.

Khi biện pháp trên vẫn không hiệu quả, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm điện, sau đó liên hệ với đội ngũ kỹ thuật.

BẢO TRÌ VÀ BẢO HÀNH

Bảo trì

Nếu bạn không sử dụng ghế massage trong khoảng thời gian dài, hãy thực hiện bảo trì trước khi sử dụng

Bạn có thể tiến hành kiểm tra xem có xuất hiện các hiện tượng bất thường ở ghế hay không:

- Có mùi lạ, mùi khét
- Âm thanh bất thường phát ra
- Dây nguồn và phích cắm nóng bất thường
- Ghế massage dừng hoạt động bất ngờ
- Các hiện tượng bất thường khác

NGƯNG SỬ DỤNG

Để tránh sự cố hoặc tai nạn có thể xảy ra, bạn hãy tắt nguồn và rút phích cắm sau đó gọi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra sửa chữa

Bảo hành

- Sản phẩm được bảo hành 6 năm.
- Sản phẩm được sản xuất theo quy tắc nghiêm ngặt và được kiểm tra tỉ mỉ trước khi giao hàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm		Ghế massage không trọng lực
Mẫu sản phẩm		OR-500
Định mức	Điện áp	110-240V ~ (50-60Hz)
	Thời gian tiêu chuẩn	15 phút
	Công suất	200W
Mức độ con lăn massage	Xoa bóp	3 cấp độ
	Đấm	3 cấp độ
Cường độ con lăn massage		7 cấp độ
Cường độ xoa bóp bằng túi khí		7 cấp độ
Cường độ xoa bóp tay bằng túi khí		7 cấp độ
Cài đặt thời gian hoạt động		Có thể điều chỉnh: 15 phút (mặc định), 20 phút, 25 phút, 30 phút
Điều chỉnh góc độ ghế	Tựa lưng	Khoảng 106° - 13,2°
	Chỗ để chân	Khoảng 0° - 46°
Kích thước ghế (Dài x rộng x cao)	Đứng	155 x 83 x 125cm
	Nằm xuống	194 x 83 x 108cm
Trọng lượng	Đóng thùng	136kg
	Ghế	110kg

* Không được sử dụng ghế massage với điện áp khác với điện áp định mức.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm sẽ được trung tâm bảo hành của Oreni sửa chữa miễn phí, nếu hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
- Trung tâm bảo hành không nhận sửa chữa qua các đại lý, trừ trường hợp đại lý đã thỏa thuận ủy quyền trực tiếp với công ty. Khách hàng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của công ty.
- Khi khách hàng mang sản phẩm đi bảo hành lưu ý nhớ mang theo phiếu bảo hành kèm theo.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:

1. Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ những thông tin theo quy định.
2. Số seri trên sản phẩm, trên phiếu bảo hành không giống nhau, bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.
3. Tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm, sửa chữa tại những nơi không phải do Oreni ủy quyền.
4. Có dấu hiệu cháy, khét, có dấu hiệu côn trùng hay chuột phá hại.
5. Các sự cố hư hỏng, rách nát phần da và nhựa bị mòn xước trong quá trình sử dụng.
6. Các lỗi do va chạm, gây vỡ trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lắp đặt.
7. Các hư hỏng do:
 - Vận chuyển, sản phẩm sử dụng không đúng theo hướng dẫn.
 - Vết trầy xước, bẩn, rỉ sét, vết mòn do điều kiện bảo quản, sử dụng.
 - Các tai nạn khách quan: hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh...
 - Các bộ phận bên ngoài: vỏ thùng, vỏ hộp, vỏ sản phẩm...
 - Các phụ kiện tiêu hao: adaptor, bóng đèn, thẻ nhớ, tai nghe,... các sản phẩm khuyến mại nếu có.

Trường hợp được bảo hành:

1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến không sử dụng được.
2. Lỗi do hư hỏng của chính linh kiện do trong quá trình sử dụng bình thường, đúng thiết kế của nhà sản xuất.



Công ty TNHH ORENI Việt Nam

Địa chỉ: 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Mua hàng: 0243 5656 222 - 0846 99 11 99

Email: orenivietnam@gmail.com

Website: www.oreni.vn